


Labor Dr. Edith Beck

4020 Linz, Hopfengasse 3

Anleitung zur richtigen Probenentnahme für HPV & Dünnschichtzytologie

- übermäßigen Schleim vom Muttermund mit Reinigungstupfer entfernen
- Abnahmebürste A tief in den Cervikalkanal einführen, sodass kürzere Borsten vollständig mit Portiooberfläche in Kontakt sind
- vorsichtig andrücken und ca. 5x im Uhrzeigersinn drehen um angemessene Probenentnahme zu gewährleisten
- Bürste vorsichtig herausziehen – Kontakt mit Vaginalschleimhaut vermeiden
- Bürste in der Probenflüssigkeit B „auswaschen“, dabei ca. 10x auf Flaschenboden drücken
- nochmals Bürste mehrfach drehen um weitere Zellen zu lösen
- Bürste entsorgen
- Transportgefäß fest verschließen, beschriften, bei Raumtemperatur lagern

Bitte beachten: ab 10. SSW keine Bürste zur Abnahme verwenden! (Alternative: z.B. Spatel)

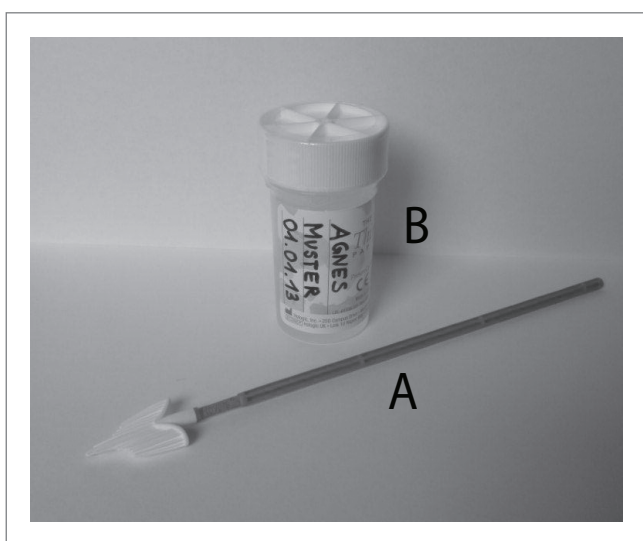

Abnahmeset:

- A Abnahmebürste
- B Transportgefäß mit Konservierungslösung